

着圧エステ&マッサージ
ReflexBoots
リフレックスブーツ

エア・ルピエ

◎ *Air Le pied*



絞る!!

空気の圧力で

ほぐす



遠赤外線温熱

ワンランク上のフットケアを実感してください。

エア・ルピエは、エアバッグの圧力を利用した着圧絞り上げマッサージと遠赤外線の温熱作用と湯の花シートのホルミシス効果を備えた健康美容器具です。

つらい疲れやむくみは、その日のうちに和らげましょう。足のむくみやセルライトをスッキリと解消して健康美脚に生まれ変わりませんか？

ブーツはマジックテープで調節しますので、幅広いサイズに対応可能で、着脱も簡単です。

気になる電磁波は、カット!安心してお使い頂けます。

ホルミシス効果

*特殊技術から生まれた
湯の花シート*
エア・ルピエに封入されている湯の花シートは、玉川温泉「湯の花」を長年の研究により、天然の北投石が有する機能的特徴に95%まで近づけたパウダーシートです。
細胞の活性化、免疫力の向上、老化防止、美容や健康などのホルミシス効果が期待できます。


足は第2の心臓

上半身とは違い重力の影響により、停滞してしまう下半身の血液を歩くことなどの筋肉運動によって上部へ送り出し、再び心臓に戻すポンプの役割を行っているのが足の筋肉のポンプ作用です。

そんなことから「ふくらはぎ」は「第2の心臓」と呼ばれています。

立ち仕事やデスクワークなどによる足の運動不足や冷房などによる「冷え」「低体温」「ストレス」等によって足のポンプが十分に働けなくなると血液はもちろん、体液や老廃物が足に停滞してむくみや冷え、セルライトの原因になり、滞った老廃物やセルライトが毛細血管を圧迫し、さらに血液の流れが悪くなるという悪循環を引き起こしています。

第2の心臓である大切な足をケアすることは、全身の健康や美しさにもつながると言えるでしょう。

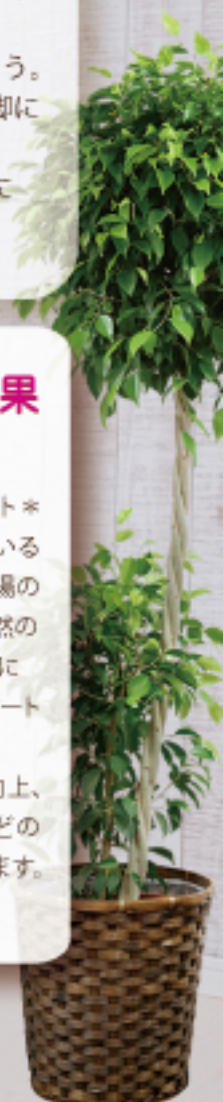

遠赤外線モード

遠赤外線の温熱効果により新陳代謝を促し、分泌作用・血流がよくなり、マッサージや押し上げの効果がさらにアップします。



着圧のしくみ

「つま先から足首」「ふくらはぎ」「ひざ」「太腿」にピッタリと隙間なく配置されたエアバッグがたっぷりと送り込まれる空気の圧力により【ふくらむ加圧】→【しっかりと圧力キープ】→【除圧】を繰り返すことで足全体を絞り上げ、心地よく揉みほぐします。



着圧モード

◆マッサージ

むくみ、疲れ、老廃物などでカチカチに固まった足を空気の圧力で揉みほぐし老廃物を流します。

◆押し上げ

セルライトを圧迫し、疲れた筋肉をしっかりほぐし、リンパの流れを促進させて、むくんだ足をキュッと引き締めます。

着圧マッサージ

● 加圧 ● 除圧 ○ エアーが抜けている状態


モード1

- ①つま先:加圧13秒
キープ:16秒
キープ後:除圧
- ②ふくらはぎ:加圧11秒
キープ:16秒
キープ後:除圧
- ③ひざ周辺:加圧11秒
キープ:16秒
キープ後:除圧
- ④太腿:加圧11秒
キープ:8秒
キープ後:除圧
- ⑤①に戻り、15分間
繰り返します。



モード2

- ①つま先:加圧15秒
キープ:18秒
キープ後:除圧
- ②ふくらはぎ:加圧13秒
キープ:18秒
キープ後:除圧
- ③ひざ周辺:加圧13秒
キープ:18秒
キープ後:除圧
- ④太腿:加圧13秒
キープ:8秒
キープ後:除圧
- ⑤①に戻り、15分間
繰り返します。

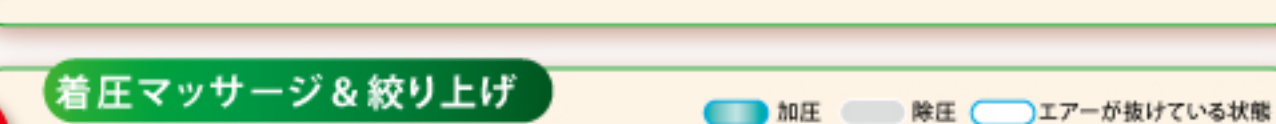

着圧マッサージ&絞り上げ

● 加圧 ● 除圧 ○ エアーが抜けている状態

モード3




※③の加圧から⑤の除圧まで120秒間です。

仕様

商 品 名	リフレックスブーツ エア ルピエ
電 源	電源 AC100 V~240 V 50-60 Hz (DC24V 4 A)
消 費 電 力	加熱 70W±5 W 気圧 18W±5 W
定 格 時 間	15分
サ イ ズ	ブーツ 長 さ 930mm 最大周囲大腿部 580mm 最大周囲ふくらはぎ 450mm 足サイズ 20cm~28cm コントロールボックス 213×198×88 (mm)
重 量	ブーツ(ホース付き) 2.96kg コントロールボックス(アダプター付き) 1.50kg
ア ラ ー ム 材 質	遠赤外線モード始動後 約 10分 ブーツ:帆布地 エアーホース: シリコン コントロールボックス:ABS樹脂
製 造 国	日 本

※改良のため、仕様・デザインを予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

価 格:248,000円(税別)

 株式会社優美

〒107-0062

東京都 港区 南青山 6-12-14 ハウス青山 201号

TEL 03-6380-8866 FAX 03-3409-5522